


รายละเอียดการตั้งค่า		สรุปข้อมูลการชั่งน้ำหนักยา 10 เม็ด (g.)	
T17	เครื่องตอก	ค่าน้ำหนัก Min.	0.994
PI-066	เครื่องชั่ง	ค่าน้ำหนัก Max.	1.010
travan 1.0	ชื่อยา	ค่าน้ำหนัก Average	1.002
30457	Lot.	สรุปข้อมูลความหนาเม็ดยา (mm.)	
1.000	น้ำหนักตามทฤษฎี	ค่าความหนา Min.	2.30
0.970	Min	ค่าความหนาMax.	3.39
1.030	Max	ค่าความหนา Average	2.37
0.920	Min. ตามกฎหมาย		
1.080	Max. ตามกฎหมาย		
3.00%	เปอร์เซ็นต์เบี่ยงเบน		
2.00	Min.ความหนา		
2.80	Max.ความหนา		
ชิตชนก	Username ที่ตั้งค่า		
สิริยาภรณ์	Admin ที่ตรวจสอบการตั้งค่า		
จบการผลิตโดย สำลี วันที่ 16/06/2023, 00:54:37			

Remarks					
วันที่/เวลา	เหตุการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง	สาเหตุ	การแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้บันทึก
15/06/2023, 12:47:51	15/06/23 10:30-11:30น. มีการหยุดเครื่องเนื่องจากลื่นใบพัดเลื่อนทำให้เมื่อนำเข้าในใบพัดออกมาพบว่า มีเศษล้าในแกรนูล ดังนั้น จึงตรวจสอบใบพัด พบว่าใบพัดประกอถูกตึงและไม่มีแกรนูลที่เก้	1. ลื่นใบพัดเลื่อน เนื่องจากมีดที่ถือคลื่นไม่แน่น ส่งผลให้ยาอัดแล 2. จุดล้าในเม็ดขามาจากผงแกรนูล	1. ปรารถนาลื่นใบพัดใหม่ 2. แกรนูลในใบพัด ปริมาณ 0.80 kg จะให้มีการเลือกจุดล้าออกก่อนนำไปใช้ออกยาส่อ		จิตชนก
15/06/2023, 22:37:57	15/06/23 เวลา 22.22 น. พบความหนา 3.39 mm	พนักงานลงข้อมูลไม่ถูกต้อง	สุ่มตรวจสอบความหนาของเม็ดพบว่าอยู่ใน specification	-	สิริยาภรณ์

ข้อกำหนด (ต้องปรับน้ำหนักและชั่งซ้ำทันที)

- 1. มี 1 จุดตกนอก97หรือ103แต่ไม่เกิน95หรือ105
- 2. มี2จุดติดต่อกันระหว่าง97.0-97.5หรือ102.5-103.0
- 3. มี5จุดติดต่อกันด้านใดด้านหนึ่งของ 100

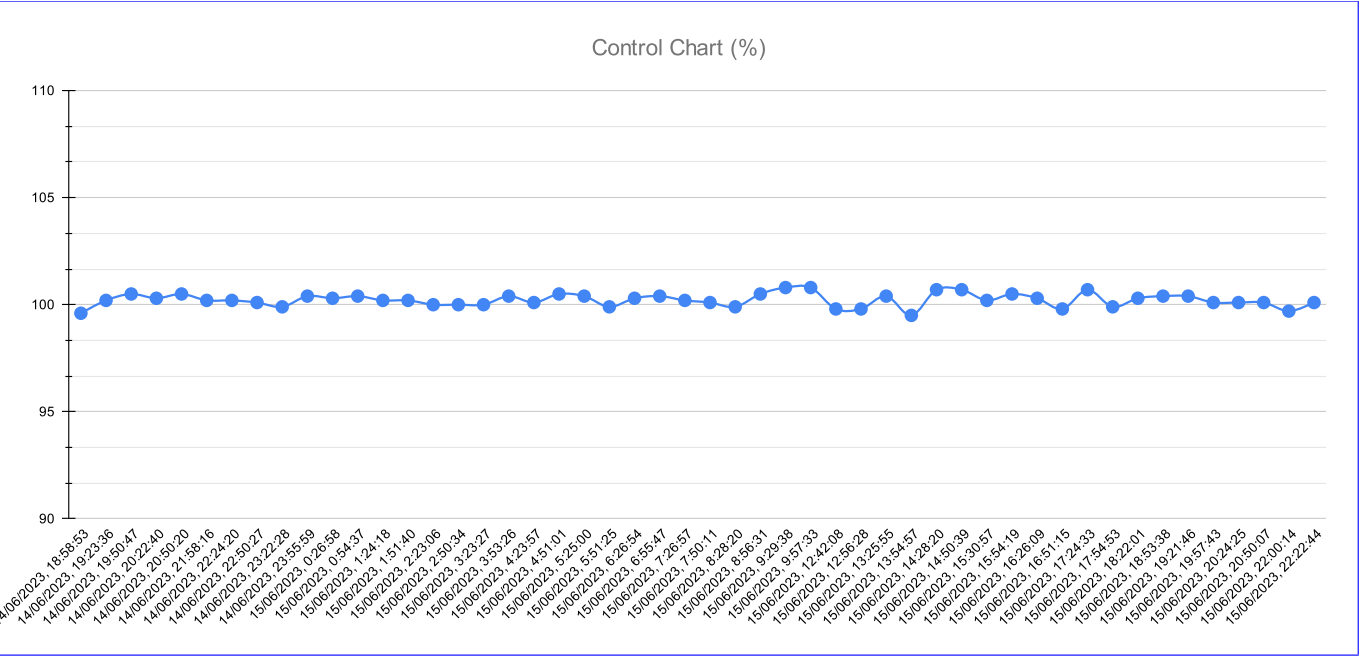





[illegible]