


รายละเอียดการตั้งค่า		สรุปข้อมูลการชั่งน้ำหนักยา 10 เม็ด (g.)	
T11	เครื่องตอก	ค่าน้ำหนัก Min.	3.192
PI-229	เครื่องชั่ง	ค่าน้ำหนัก Max.	3.218
AMLOVASC 10	ชื่อยา	ค่าน้ำหนัก Average	3.205
30793	Lot.	สรุปข้อมูลความหนาเม็ดยา (mm.)	
3.200	น้ำหนักตามทฤษฎี	ค่าความหนา Min.	3.77
3.110	Min	ค่าความหนา Max.	3.90
3.290	Max	ค่าความหนา Average	3.84
2.960	Min. ตามกฎหมาย		
3.440	Max. ตามกฎหมาย		
3.00%	เปอร์เซ็นต์เบี่ยงเบน		
3.70	Min.ความหนา		
4.30	Max.ความหนา		
ชิตชนก	Username ที่ตั้งค่า		
สิริยาภรณ์	Admin ที่ตรวจสอบการตั้งค่า		
จบการผลิตโดย สำลี วันที่ 22/06/2023, 10:43:37			

Remarks					
วันที่/เวลา	เหตุการณ์ที่เฝ้าการเปลี่ยนแปลง	สาเหตุ	การแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้บันทึก
22/06/2023, 10:32:09	เวลา 09.30น.พบเม็ดยาลึดจาก ล้ออีกรั้วตัวP แต่หน้าเม็ดยายังอ่าน PCL แกรนูลิติดหน้าล้าก		หยุดเครื่องข้อล้ากตัวอีกรั้วเริ่มลอกยาเวลา10.00น.		สำลี

ข้อกำหนด (ต้องปรับน้ำหนักและชั่งซ้ำทันที)

- 1. มี 1 จุดตกนอก97หรือ103แต่ไม่เกิน95หรือ105
- 2. มี2จุดติดต่อกันระหว่าง97.0-97.5หรือ102.5-103.0
- 3. มี5จุดติดต่อกันด้านใดด้านหนึ่งของ 100

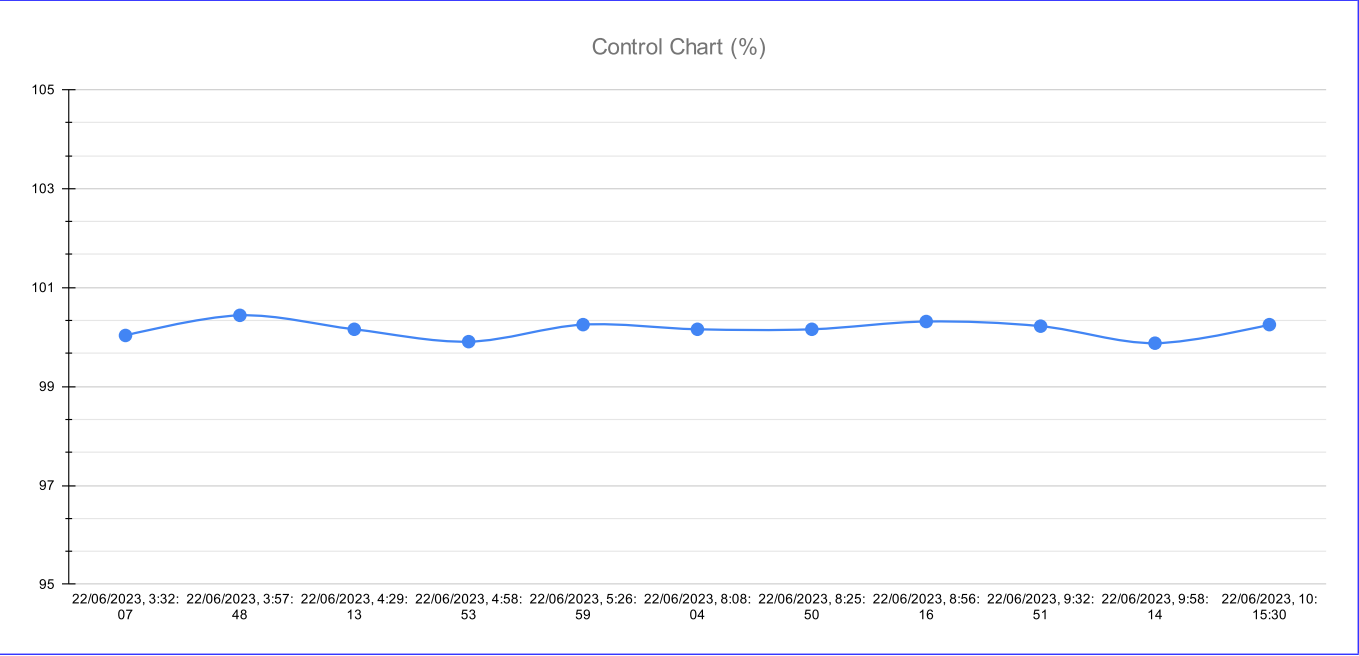

ชื่อยา	AMLOVASC 10	เครื่องชั่ง	PI-229	น้ำหนักตามทฤษฎี 10 เม็ด	3.200	ค่าความหนา(Thickness)	3.70 - 4.30	มิลลิเมตร(mm)
เลขที่ผลิต	30793	เครื่องตอก	T11	ชว่งน้ำหนัก 10 เม็ด	3.110	-	3.290	กรัม (g) (3.00%)

[illegible]

